

SRN van fabrikant: US-MF-000017721

Bijlage A: lucht in slang van Kangaroo Joey en ePump enterale voedingspompsets

Productcode	Productbeschrijving	Betrokken partijen
666064	Joey 500 ml, set met ALLEEN VOEDINGSZAKKEN	Alle producten geproduceerd vanaf april 2022 met partijnummers 22D tot juli 2023 tot en met partijnummers 23G.
666106	666106 Joey 1000 ml, set met ALLEEN VOEDINGSZAK	
777501	Joey ENPLUS Spike, set met ALLEEN VOEDINGSZAK	
777502	Joey Dual ENPLUS Spike, set met ALLEEN VOEDINGSZAK	
777503	Joey ENPLUS 3-in-1 met ALLEEN VOEDINGSZAK	
777106	EPUMP 1000 ml EZ met ALLEEN VOEDINGSZAK	


Controleer of er tijdens het vullen lucht in de slang van de voedingsset komt.

- Voordat u het hulpmiddel aansluit op de patiënt:
 - Zorg voor aanvullende vulling door de knop 'HOLD TO PRIME FEED BUTTON' (INGEDRUKT HOUDEN OM VOEDINGSZAK TE VULLEN) ingedrukt te houden.
 - Controleer of de slang tussen de pomp en de patiënt lucht bevat.
 - Gebruik de voedingsset niet als een enkel segment lucht of meerdere luchtbelllen samen meer dan 1,3 cm zijn.

Controleer of er lucht in de voedingsset komt tijdens de toediening.

- Tijdens de patiëntrondes:
 - Controleer regelmatig op overmatige lucht in de slang.
 - Gebruik de voedingsset niet en gooi deze weg als een enkel segment lucht of meerdere luchtbelllen samen meer dan 1,3 cm zijn.

Opmerking: het is niet ongebruikelijk en geen probleem als de voedings slang een kleine hoeveelheid lucht bevat (tot 1,3 cm).

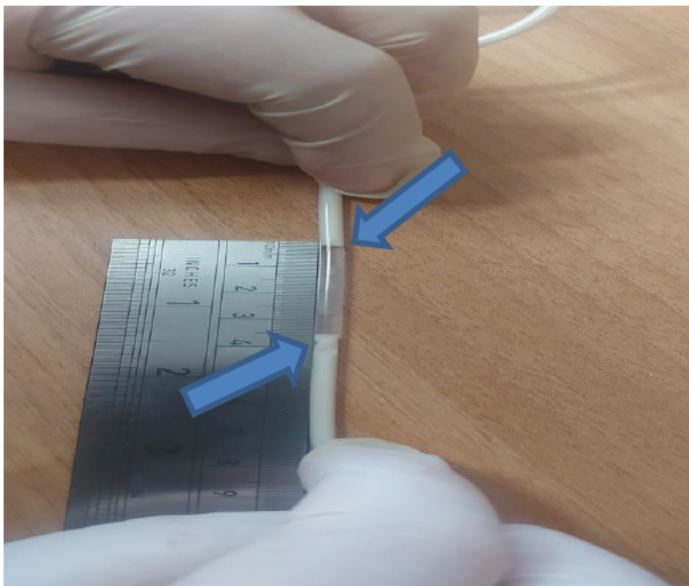

*Dit is een voorbeeld, de lucht in de slang is mogelijk niet zo duidelijk zichtbaar als weergegeven in de afbeelding.